


健診は定期的に受けましょう

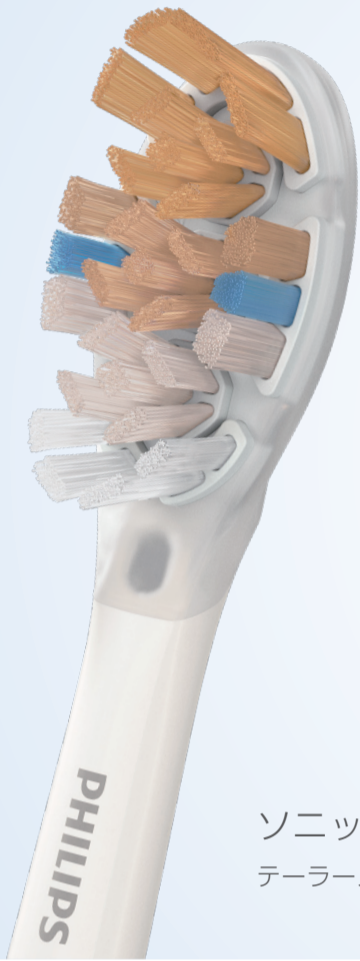

ソニックケア
テーラーメイド型電動歯ブラシ

3ヶ月に1回

替ブラシの交換をされていますか？

ブラシヘッドが消耗すると歯垢除去力が落ちてしまいます。
歯垢除去力を維持するために3ヶ月に1回交換することをおすすめします。

交換時期のお知らせ機能は2か所



※RFID対応ブラシヘッド使用時

ご使用後は適切なお手入れで清潔に



流水またはコップに水を入れ、電源を入れてブラシを数秒洗います



電源を入れて数秒水分を飛ばします



乾燥・充電します



ソニックケアの使い方を動画でご確認いただけます
QRコードを読み取りご覧ください



このポスターは診療室内でご使用ください。