



cheero

オトカルティ

リンク

Otocarti[®] LINK

首かけ軟骨伝導式集音器

耳のクボミに載せるだけ。
耳穴を完全に塞がない。



**説明の声が聞き取りやすくなる。
外来や訪問診療でも使いやすい。**

- ・ 清潔（音が出る穴がないから清掃が簡単）
- ・ 耳穴を完全に塞がない快適性
- ・ 音がクリアで明瞭（聞こえには個人差があります）

一般的な
イヤホン



音が出る穴


軟骨伝導
イヤホン



穴が無い

軟骨伝導とは

「軟骨伝導」は「骨伝導」の一種であるかのように誤解されがちですが、その聞こえのメカニズムや音伝達の性質、特徴は「骨伝導」とは全く異なります。2004年に奈良県立医科大学 理事長・学長の細井裕司先生が発見した軟骨伝導は、これまでに知れ渡っていた空気を震わせて音を伝える「気導」と、骨を震わせて音を伝える「骨伝導」とは別の経路となる第3の聴覚経路です。

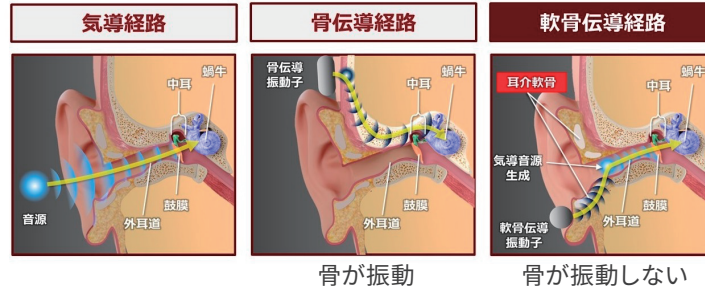

Otocarti LINKの特長

話し声が大きく聞こえます

集音器の多くは、すべての音を増幅させるため、不要な雑音まで大きくなります。本商品は、雑音を除去する独自技術により話し声が大きく聞こえます。受付・会計窓口での聞き返しを減らし、スムーズな案内を実現します。

長時間使用可能な大容量バッテリー搭載

1回の充電で約18～20時間ご使用いただけるため、頻繁に充電する必要はございません。また、繰り返し充電できるバッテリーを搭載しているので、乾電池を交換する手間は不要です。

操作がシンプル

操作手順が少なく、お年寄りの方でも簡単に使えます。患者様のご負担を最小限に抑えます。

ハウリング防止機能

ハウリング音(ピーピー音)を抑制し、不快感を軽減します。

IP65 相当の防塵防水性能

家事で水を使ったり、突然の雨でもご使用いただけます。
(※水滴レベルの防水等級ですので、長時間の浸水には対応しておりません)

簡単操作 3ステップ



製品仕様

型番	CHE-N-004	バッテリー容量	3.7V/500mAh
寸法(本体)	約130×175×20mm	入力	USB-C 5V/0.5A max.
重量(本体)	約50g	本体充電時間	約2.5時間
連続使用時間	約18～20時間	※ご使用状況によって異なる場合があります。	
防塵防水規格	IP65		

付属品 充電用USB-A to Cケーブル、USB-Aアダプター、サポートホルダー、イヤークリップ、ポーチ、清掃用クロス、取扱説明書、保証書(1年保証)

※本製品のイヤホン部分には磁石を使用していますので、ペースメーカーをご使用の方は、本製品を使用しないでください。

製造元

cheero

ティ・アール・エイ株式会社
大阪市中央区北浜東 6-6
TEL: 06-6910-6224 / E-mail: love@cheero.jp

販売元

MORITA

株式会社モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水区 3-33-18 〒564-8650 TEL: 06-6380-2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 TEL: 03-3834-6161
お問い合わせ お客様相談センター < 歯科医療従事者様専用 >
TEL: 0800-222-8020 (フリーコール) www.dental-plaza.com